

ANLEITUNG & TIPPS



o88rlino
• erstohrstecker •

...der behutsame
Weg zu deinem
ersten Ohrloch!



ABLAUF

1. Muster Auswählen und Einverständniserklärung ausfüllen
2. Position klären und anzeichnen
3. Desinfizieren
4. Kartusche in den Stechapparat setzen
5. Zielen
6. In einer möglichst gleichmäßigen Bewegung stechen
7. Auf Pflegehinweise in der Einverständniserklärung hinweisen

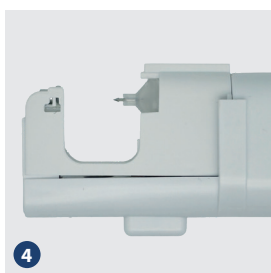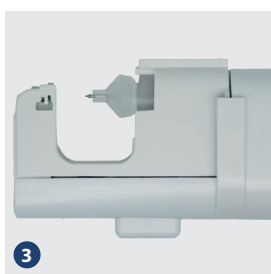

VORBEREITUNG

Bitte achten Sie auf ausreichende Desinfektion der Ohren, Hände und des Stechapparates **1**. Das Verwenden von Handschuhen ist in vielen Ländern ebenfalls vorgeschrieben.

Bitte entnehmen Sie die Kartusche vorsichtig aus der Verpackung; Sie können diese beruhigt anfassen, da Stecker und Hütchen in der Kartusche geschützt sind und somit die bestmögliche Reinheit gewährleistet ist.

Setzen Sie die Kartusche in den Stechapparat ein **2** (es klickt gut hörbar, wenn die Kartusche richtig platziert ist)

Erst beim Benutzen des Stechapparates wird die Spitze des Steckers sichtbar (bei ca. 8mm). Für die bessere Platzierung können Sie auch vor dem Stechen den Stechapparat etwas betätigen, bis die Spitze sichtbar wird **3**; wenn Sie dann loslassen, wird der Schutzcontainer wieder etwas zurückgezogen so dass Sie die Positionierung am Ohr komfortabel vornehmen können **4**.

Für das Stechen den Stechapparat zur Wange ausrichten, so dass der Stechkanal nachher etwas nach vorne ausgerichtet ist. Wird senkrecht zu den Ohrfläppchen gestochen, kommt der Ohrschmuck gegebenenfalls nicht richtig zur Geltung.

Nach dem Stechen kann die Kartusche über den Druckknopf unter dem Apparat gelöst werden und im Kunststoffmüll entsorgt werden.

Bitte weisen Sie den Kunden auf die Pflegehinweise in der Einverständniserklärung hin, um Komplikationen zu vermeiden.